

TRU TOURNIQUET

SIMULATEUR DE CONTRÔLE
HÉMORRAGIQUE PAR
GARROT TOURNIQUET

Le **TruTourniquet** est un modèle anatomique de simulation constitué d'une cuisse présentant un point de saignement et d'un fémur fracturé. Il est dédié à l'apprentissage de la gestion d'hémorragies massives en situation d'urgence avec amputation traumatique.

Le mannequin est relié à une poche de sang sous pression qui permet le déclenchement d'une hémorragie massive en continu. L'apprenant peut ainsi procéder à la mise en place d'un garrot tourniquet (non fourni). Dès lors que le garrot est installé et présente une pression suffisante, le flux sanguin s'arrête. Le TruTourniquet offre donc un retour immédiat sur la qualité du geste réalisé.



CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

RÉALISTE & IMMERSIF

Poids, taille et positions de la cuisse (horizontale ou verticale) au plus proche de la réalité anatomique humaine et d'une blessure traumatique par arrachement. Possibilité d'installer jusqu'à deux garrots tourniquet.

PÉDAGOGIQUE

Avec le flux sanguin intégré simulant l'hémorragie, l'apprenant dispose d'un retour immédiat grâce à l'arrêt du flux sanguin lorsque le garrot tourniquet est correctement installé et présente une pression suffisante.

MOBILE & FACILE À UTILISER


Livré dans un sac de transport, il est facilement transportable et pratique à ranger. Simple à installer, quelques minutes suffisent pour qu'il soit opérationnel.

PLURIDISCIPLINAIRE

Il s'adresse à un large public tant d'étudiants que de praticiens, dans différentes spécialités, telles que la médecine d'urgence, la chirurgie, le secourisme...

RÉSISTANT & DURABLE

Son matériau robuste a été testé jusqu'à 40 000 utilisations sans détérioration du dispositif.

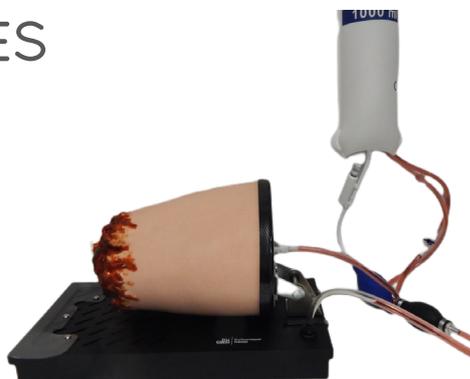

Désignation

Référence

Tarif

- 1 x TruTourniquet avec protection anti-éclaboussures
- Pompe manuelle, tubulure et connecteurs rapides
- Poche de sang 1L avec indicateur de pression + Sang concentré 250ml
- 3 fixations de rechange pour la protection anti-éclaboussures
- 1 sac de transport

TCP-TTQ1000

Nous consulter



Twin Medical
21 rue Paul Pousset
F - 49130 Les Ponts-De-Cé
Tel. +33 2 41 05 82 91

www.twin-medical.com
info@twin-medical.com

